




صوّر رمز الاستجابة السريعة الموجود  
في الدليل أو أعلى الحاوية للاطلاع على الدليل  
بلغات متعددة والفيديو الخاص بالاختبار المتاح على  
AusDiagnostic.care

### أخذ العينة:

يمكن أن يقوم شخص يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر بأخذ عينة المسحة الأنفية ذاتيًا. يجب أن يقوم أحد الوالدين أو الوالي الشرعي بالقيام بذلك للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا. لا تستخدم الاختبار للأطفال دون السنتين من العمر.

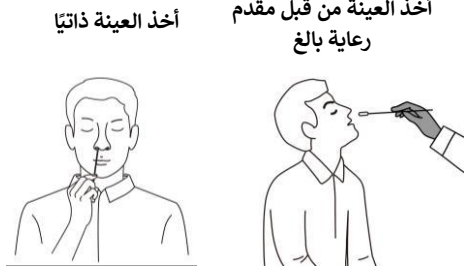


### تفسير النتيجة

ظهور خط التحكم (C) فقط وعدم ظهور خط الاختبار (T) يعني أنه لم يتم الكشف عن وجود مستضد SARS-CoV-2. تشير نتيجة الاختبار السلبية إلى عدم احتمال إصابتك حاليًا بمرض كوفيد-19. استمر في اتباع جميع القوانين والإجراءات الوقائية المعمول بها عند التواصل مع الآخرين. قد تكون حاملًا للعدوى بالرغم من أن نتيجة الاختبار سلبية. إذا كان لديك شك، كرر الاختبار بعد يوم أو يومين، لأنه من غير الممكن الكشف عن وجود فيروس كورونا بدقة في جميع مراحل الإصابة.




سلبي

ظهور كل من خط التحكم (C) وخط الاختبار (T) يعني أنه قد تم الكشف عن وجود مستضد SARS-CoV-2.

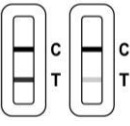

إيجابي

**ملاحظة: يجب اعتبار أي خط باهت في منطقة خط الاختبار (T) على أن نتيجة الاختبار إيجابية.** نتيجة الاختبار الإيجابية تعني أنه من المحتمل جدًا أنك تكون حاليًا مصابًا بمرض كوفيد-19. اتبع القوانين والإرشادات الصادرة عن هيئة الصحة في الولاية أو الإقليم. اتبع الإرشادات المحلية الخاصة بالعزل الذاتي.

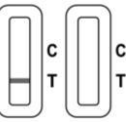

غير صحيح

عدم ظهور خط التحكم (C). عدم كفاية حجم العينة أو تنفيذ العملية بشكل غير صحيح هي الأسباب المحتملة لنتيجة غير صحيحة. راجع التعليمات مرة أخرى وكرر الاختبار باستخدام علب جديدة. إذا جاءت نتيجة الاختبار غير صحيحة مجددًا، اتصل بالخدمات المعنية باختبارات فيروس كورونا في ولايتك أو إقليمك.

### التخلص من مجموعة الاختبار الخاصة بك بأمان

بمجرد إكمال الاختبار، ضع كل محتويات مجموعة الاختبار المستخدمة في كيس النفايات المزود. ضعه في حاوية النفايات المنزلية العامة.

خط المساعدة لتقديم الدعم الخاص بشركة AusDiagnostics:  
1800951381 (على مدار الساعة، طوال الأسبوع)

### المواد المزودة:

المحتويات	حجم المجموعة
علبة اختبار واحدة، أنبوب واحد عازل لعينة الاستخراج، مسحة واحدة للاستعمال والرمي، كيس نفايات واحد، نشرة واحدة مرفقة بالعبوة	1T
5 علب اختبار، 5 أنابيب عازلة لعينة الاستخراج، 5 مسحات للاستعمال والرمي، 5 أكياس نفايات، نشرة واحدة مرفقة بالعبوة	5T
20 علب اختبار، 20 أنبوب عازل لعينة الاستخراج، 20 مسحة للاستعمال والرمي، 20 كيس نفايات، حامل واحد للأنابيب، 4 نشرات مرفقة بالعبوة	20T

المواد المطلوبة ولكنها غير مزودة: جهاز توقيت

اختبار مستضد فيروس كورونا 2 المسبب لمتلازمة  
الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم (SARS-CoV-2) السريع  
(الاختبار الذاتي)

النشرة المرفقة بالعبوة

Flowflex™

عربي	L031-118Z5 المرجع	L031-118P5 المرجع	L031-118M5 المرجع
------	-------------------	-------------------	-------------------

اختبار سريع للكشف عن مستضد نوكليوكابسيد الخاص بـ SARS-CoV-2 في عينات مسحات الأنف الأمامية.

للاستخدام التشخيصي المختبري فقط. للاختبار الذاتي.

اقرأ التعليمات بعناية قبل إجراء الاختبار.

### التحضير

1. اغسل يديك أو عقمهما. تأكد من تجفيفهما قبل بدء الاختبار.
2. اقرأ التعليمات قبل استخدام مجموعة اختبار مستضد SARS-CoV-2 السريع.
3. تحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية المطبوع على كيس القصدير على العبوة.
4. افتح الكيس. ضع عبوة الاختبار على سطح مستو ونظيف. تحقق من نافذة النتيجة ومكان العينة على العبوة.

### الإجراءات الخاصة بالاختبار

1. انزع رقاقة الألومنيوم بعناية من الجزء العلوي للأنبوب العازل لعينة الاستخراج وتجنب الانسكاب.
2. ضع الأنبوب في الفتحة الموجودة في عبوة الأدوات. (أو ضع الأنبوب في حامل الأنابيب.)
3. افتح عبوة المسحة عند طرف العنقا. تنبيه: لا تلمس طرف المسحة الماص بيديك.
4. أدخل طرف المسحة الماص بالكامل في فتحة أنف واحدة. باستخدام حركة دائرية خفيفة، ادفع المسحة إلى الداخل لمسافة أقل من 2.5 سم من حافة فتحة الأنف.
5. حرك المسحة بشكل دائري لـ 5 مرات مع لمس الأجزاء الداخلية من فتحة الأنف. أخرج المسحة وأدخلها في فتحة الأنف الأخرى. كرر الخطوة 4.
6. أخرج المسحة من فتحة الأنف.
7. ضع المسحة داخل الأنبوب وحركها بشكل لولبي لمدة 30 ثانية.
8. حرك المسحة بشكل دائري لـ 5 مرات أثناء الضغط على جانب الأنبوب.
9. أخرج المسحة مع عصر الأنبوب.
10. ضع طرف القطارة بإحكام على الأنبوب العازل لعينة الاستخراج. امزج جيدًا عن طريق تحريك الجزء السفلي من الأنبوب بشكل لولبي أو النقر عليه.
11. اضغط برفق على الأنبوب وقم بتقطير 4 قطرات من المحلول في مكان العينة.
12. اقرأ النتيجة عندما يصل جهاز التوقيت إلى 15-30 دقيقة. لا تقرأها بعد 30 دقيقة.

