

برج L031-118M5	برج L031-118P5	برج L031-118Z5	دری
----------------	----------------	----------------	-----


تست سریع برای شناسایی انتی جن های نوکلئوکپساید سارس-کووید-2 در نمونه های سواب قسمت سطح بینی.

صرفاً برای استفاده در تشخیص لابراتواری. برای خود آزمایی.
قبل از انجام تست، طرز العمل‌ها را به دقت بخوانید.

مواد فراهم شده:

اندازه کیت	محتویات
1T	1 قلم تست، 1 تیوب بافر استخراج، 1 سواب پیکار مصرف، 1 باطله‌دانی، 1 ورق رهنمای داخل بسته
5T	5 قلم تست، 5 تیوب بافر استخراج، 5 سواب پیکار مصرف، 5 باطله‌دانی، 1 ورق رهنمای داخل بسته
20T	20 قلم تست، 20 تیوب بافر استخراج، 20 سواب پیکار مصرف، 20 باطله‌دانی، 1 تیوب گیر، 4 ورق رهنمای داخل بسته

مواد مورد ضرورت اما فراهم نشده: زمان سنج

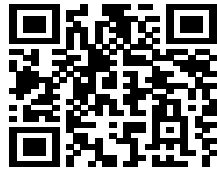

ausdiagnostics.care/
resources


برای دسترسی به راهنمای چند زبانه و ویدیوی تست در سایت Ausdiagnostics.Care، کد QR داخل رهنمای یا بسته بندی را اسکن کنید.

جمع‌آوری نمونه

جمع‌آوری شخصی



جمع‌آوری ذریعه یک مراقب

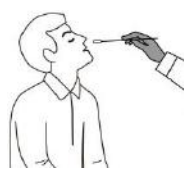


یک نمونه سواب بینی را می‌توان ذریعه یک شخص بالای 18 سال جمع‌آوری کرد. در اطفال زیر 18 سال، این کار باید ذریعه والد یا قیم قانونی انجام شود. از این تست برای اطفال زیر 2 سال استفاده نکنید.

تفسیر نتیجه تست



منفی

صرفاً خط کنترل (C) به نمایش می‌آید و کدام نوع خط تست (T) ظاهر نمی‌شود. این به معنی آن است که کدام نوع انتی جن سارس-کووید-2 شناسایی نشده است. نتیجه منفی تست نشان می‌دهد که بعد از تست در حال حاضر دچار مرضی کووید-19 نباشید. در زمان تماس با دیگران، حداقل از تمامی قوانین ذریعه و تدابیر حفاظتی پیروی کنید. حتی اگر نتیجه تست منفی است، ممکن است الودگی وجود داشته باشد. در صورت مشکوک بودن، تست را بعد از 1 الی 2 روز تکرار کنید، چون کرونا وایرس را نمی‌توان در تمامی مراحل ابتلا، دقیقاً تشخیص داد.

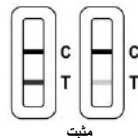

مثبت

هم خط کنترل (C) و هم خط تست (T) ظاهر می‌شود. این به معنی آن است که انتی جن سارس-کووید-2 شناسایی شده است.
نوت: هر خط ضعیف موجود در ناحیه خط تست (T) را باید مثبت در نظر گرفت. یک نتیجه مثبت تست به معنی آن است که به احتمال زیاد در حال حاضر دچار مرضی کووید-19 هستید. از توصیه‌ها و مقررات مقامات صحت ایالت یا منطقه مربوطه پیروی کنید. از طرز العمل‌های محلی قرنطین پیروی کنید.



نامعتبر


خط کنترل (C) ظاهر نمی‌شود. کافی نبودن حجم نمونه یا طرز کار غلط، دلایل احتمالی ارائه یک نتیجه نامعتبر هستند. طرز العمل‌ها را دوباره بررسی نموده و تست را با یک قلم جدید تکرار کنید. اگر نتایج تست نامعتبر باقی‌ماند، با خدمات تست کرونا وایرس ایالت یا منطقه خود به تماس شوید.

کیت تست خود را با احتیاط به دور بیندازید


بعد از این که تست تان خاتمه یافت، تمام محتویات استفاده شده کیت تست را داخل باطله‌دانی تهیه شده بیندازید. آنها را باطله‌های عمومی خانه قرار دهید.

خط مشاوره تلفونی بخش پشتیبانی AusDiagnostics:
1800951381 (24 ساعته، 7 روز هفته)


آماده سازی

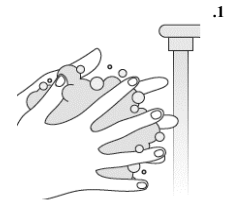

دستان خود را با آب یا مواد ضد عفونی کننده بشوید. قبل از شروع تست، از خشک بودن دست‌ها اطمینان حاصل کنید.

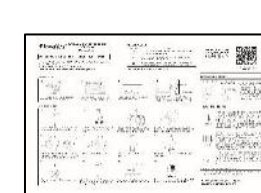

قبل از استفاده از کیت تست سریع انتی جن سارس-کووید-2، طرز العمل‌ها را بخوانید.

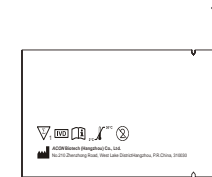

تاریخ انقضا حک شده بر روی پاکت فویل قلم را بررسی کنید.




پاکت را باز کنید. قلم تست را روی یک سطح هموار و پاک قرار دهید. پنجره نتیجه و جا نمونه‌ای داخل قلم را بررسی کنید.




پنجره نتیجه تست


پروسیجر تست

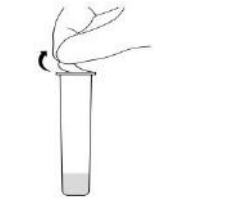


فویل المومینی را از بالای تیوب بافر استخراج بگردید و از ریختن آن خودداری کنید.

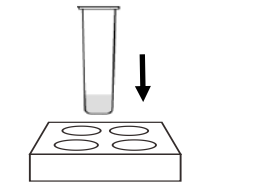


تیوب را به داخل سوراخ روی جعبه کیت داخل کنید. (و یا تیوب را در تیوب گیر قرار دهید.)

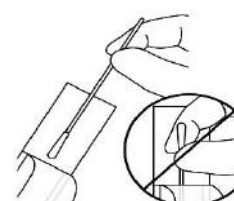


بسته بندی سواب را در انتهای چسب باز کنید. هشدار: نوک جانب سواب را با دستان تان لمس نکنید.

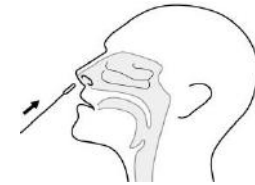

سرتاسر نوک جانب سواب را به داخل یکی از سوراخ‌های بینی داخل کنید. سواب را با چرخش ملایم و با فاصله‌ی کمتر از 2.5 سانتی‌متر از لبه سوراخ بینی فشار دهید.

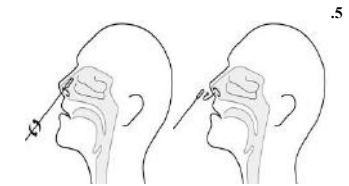


5 بار سواب را به داخل سوراخ بینی بمالید و آن را بچرخانید. سواب را در بیابورید و آن را در سوراخ دیگر بینی داخل کنید. مرحله 4 را تکرار کنید.

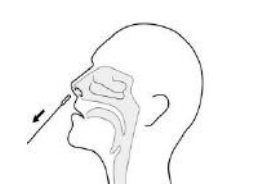


سواب را از سوراخ بینی بیرون کنید.




سواب را داخل تیوب فرو نموده و به مدت 30 ثانیه بچرخانید.

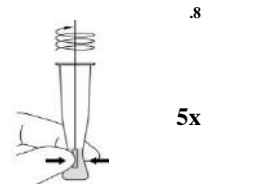


5 بار سواب را هم‌زمان با فشار دادن به کناره تیوب بچرخانید.

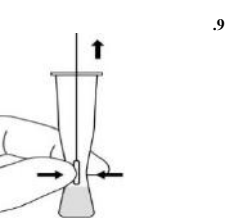


سواب را هم‌زمان با فشار دادن به کناره تیوب بیرون کنید.

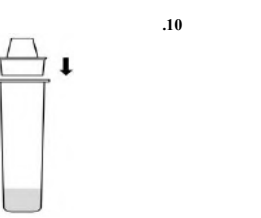

نوک قطره چکان را محکم به داخل تیوب بافر استخراج بچسبانید. زیر تیوب را با چرخاندن یا تکان دادن کاملاً مخلوط نمایید.

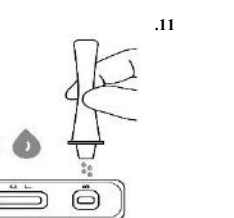

تیوب را به آرامی فشار داده و 4 قطره از محلول را داخل جا نمونه‌ای بخش کنید.

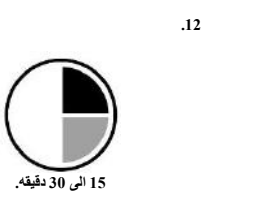

نتیجه را زمانی که زمان سنج به 15 الی 30 دقیقه رسید، بخوانید. بعد از گذشت 30 دقیقه نخوانید.



15 الی 30 دقیقه.

