

فارسی	REF L031-118Z5	REF L031-118P5	REF L031-118M5
-------	----------------	----------------	----------------


یک تست سریع برای تشخیص آنٹی ژن‌های نوکلئوکپسید سارس-کوو-۲ در نمونه‌های سواب بینی قدیمی. فقط برای استفاده تشخیصی آزمایشگاهی. برای خودآزمایی.

قبل از انجام تست دستورالعمل‌ها را با دقت بخوانید.

## مواد موجود:

محتویات	اندازه کیت
۱ عدد کاست تست، ۱ عدد لوله بافر استخراج، ۱ عدد سواب یک‌بار مصرف، ۱ عدد کیسه زیاله، ۱ عدد راهنمای مصرف داخل بسته‌بندی	1T
۵ عدد کاست تست، ۵ عدد لوله بافر استخراج، ۵ عدد سواب یک‌بار مصرف، ۵ عدد کیسه زیاله، ۱ عدد راهنمای مصرف داخل بسته‌بندی	5T
۲۰ عدد کاست تست، ۲۰ عدد لوله بافر استخراج، ۲۰ عدد سواب یک‌بار مصرف، ۲۰ عدد کیسه زیاله، ۱ عدد نگه‌دارنده لوله، ۴ عدد راهنمای مصرف داخل بسته‌بندی	20T

مواد مورد نیاز که در این کیت موجود نیست: زمان سنج (تایمر)

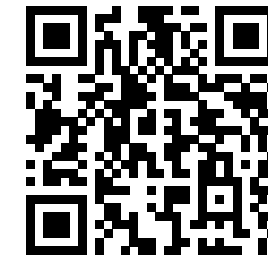


کد کیو آر (QR) موجود در راهنما یا بسته‌بندی را اسکن کنید تا به راهنمای چند زبانه و ویدیوی تست در AusDiagnostics.care دسترسی پیدا کنید.

ausdiagnostics.care  
/resources

## نمونه‌گیری

افراد ۱۸ سال به بالا می‌توانند نمونه سواب بینی را خودشان بگیرند. نمونه‌گیری از کودکان زیر ۱۸ سال باید توسط والدین یا سرپرست قانونی آنها انجام شود. از این تست برای کودکان زیر دو سال استفاده نکنید.

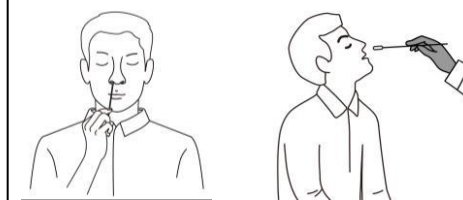

نمونه‌گیری توسط خود فرد

نمونه‌گیری توسط مراقب بزرگسال

## آماده‌سازی

- دست‌های خود را بشویید یا ضدعفونی کنید. قبل از شروع تست از خشک بودن دست‌ها مطمئن شوید.
- پیش از استفاده از کیت تست سریع آنٹی ژن سارس-کوو-۲ دستورالعمل‌ها را بخوانید.
- تاریخ انقضا چاپ‌شده روی کیسه فویل دور کاست را بررسی کنید.
- کیسه آکبند را باز کنید. کاست تست را روی یک سطح صاف و تمیز قرار دهید. پنجره نتیجه (Result window) و چاهک نمونه (Specimen well) را روی کاست تست بررسی کنید.

## روش تست

- فویل آلومینیومی را با دقت از روی لوله بافر استخراج بردارید. از ریختن آن جلوگیری کنید.
- لوله را داخل سوراخ روی جعبه کیت بگذارید (یا لوله را داخل نگهدارنده لوله قرار دهید).
- بسته‌بندی سواب را از انتهای دسته باز کنید. احتیاط: نوک جاذب سواب را با دست لمس نکنید.
- نوک جاذب سواب را کاملاً داخل یک سوراخ بینی قرار دهید. با چرخش ملایم، سواب را کمتر از دو و نیم سانتی‌متر از لبه سوراخ بینی به جلو فشار دهید.
- در حالی که سواب را به داخل سوراخ بینی مالیده‌اید آن را ۵ بار داخل سوراخ بینی بچرخانید. سواب را از سوراخ بینی خارج کنید.
- سواب را از سوراخ بینی خارج کنید.
- سواب را داخل لوله قرار دهید و ۳۰ ثانیه بچرخانید.
- در حین فشردن کناره‌های لوله، سواب را ۵ بار بچرخانید.
- در حین فشردن لوله، سواب را بیرون بیاورید.
- در قطره‌چکان را محکم روی لوله بافر استخراج بچسبانید. با چرخاندن یا با ضربه انگشت به کف لوله، کاملاً مخلوط کنید.
- وقتی تایمر به ۱۵-۳۰ دقیقه رسید، نتیجه را بخوانید. بعد از ۳۰ دقیقه نخوانید.


## تفسیر نتیجه

فقط خط کنترل (C) ظاهر می‌شود و خط تست (T) ظاهر نمی‌شود. این یعنی هیچ آنٹی ژن سارس-کوو-۲ شناسایی نشده است. نتیجه منفی تست نشان می‌دهد که نامحتمل است که شما در حال حاضر به بیماری کووید-۱۹ مبتلا باشید. هنگام تماس با دیگران، به رعایت تمام مقررات مربوطه و اقدامات حفاظتی ادامه دهید. حتی اگر نتیجه تست منفی باشد نیز ممکن است عفونی وجود داشته باشد. در صورت مشکوک بودن، تست را پس از ۱-۲ روز تکرار کنید، زیرا ویروس کرونا در تمام مراحل عفونت به طور دقیق قابل تشخیص نیست.




منفی

هم خط کنترل (C) ظاهر می‌شود و هم خط تست (T). این یعنی آنٹی ژن سارس-کوو-۲ شناسایی شده است. توجه: هر خط کم‌رنگی در ناحیه خط تست (T) باید به منزله نتیجه مثبت در نظر گرفته شود.

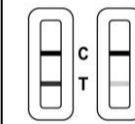

مثبت

نتیجه مثبت یعنی شما به احتمال زیاد هم‌اکنون مبتلا به بیماری کووید-۱۹ هستید. از توصیه‌ها و مقررات مقامات مسئول سلامت ایالت یا قلمرو مربوطه پیروی کنید. از دستورالعمل‌های محلی برای خود قرنطینی پیروی کنید.

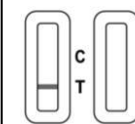

نامعتبر

خط کنترل (C) ظاهر نمی‌شود. مقدار ناکافی نمونه یا عملکرد نادرست، از دلایل محتمل نتیجه نامعتبرند. دستورالعمل‌ها را دوباره مرور و تست را با یک کاست جدید تکرار کنید. اگر نتایج تست باز هم نامعتبر شد، با خدمات انجام تست کرونای ایالت یا قلمرو خود تماس بگیرید.

## کیت تست خود را به روش ایمن دور بیندازید.

پس از انجام تست، تمام محتویات استفاده‌شده کیت تست را داخل کیسه زیاله موجود قرار دهید. آن را داخل زباله‌های خانگی عمومی خود بیندازید.

خط تلفن پشتیبانی AusDiagnostics:

1800951381 (۲۴ ساعت شبانه‌روز، ۷ روز هفته)

